


1. Tag termometeret ud af opladningsboksen, og termometeret tændes automatisk efter en vibration. Start målemodus, når "----" vises på skærmen.

⚠ OBS: Sørg for at lægge batterierne (2*AAA-batterier) i opladningsboksen inden brug.

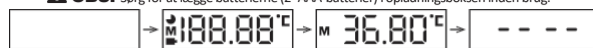

Ingen reaktion (kan ikke tændes)	Oplad termometeret, eller udskift batterierne i opladningsboksen
Display under brug	Lavt batteriniveau, oplad termometeret
Lysset er orange	Lavt batteriniveau, udskift batterierne til opladningsboksen
Høj °C	Måletemperaturen er højere end 43,00 °C
Lav °C	Måletemperaturen er lavere end 32,00 °C
Err	Fejl i sensoren, kontakt din forhandler
Er °C	Målingen er ikke afsluttet, mål venligst igen

I tilfælde af unormal drift af enheden bedes du kontakte din forhandler. For reparation og vedligeholdelse bedes du kontakte et specialiseret servicecenter.

Producenten forbeholder sig retten til at foretage ændringer i enhedens design.

KOMPLET SÆT

Elektronisk termometer – 1 stk.
Opladningsboks – 1 stk.

Opbevarings- og driftsbetingelser beskrevet i afsnittet Tekniske specifikationer.

- Sørg for, at børn ikke bruger instrumentet uden opsyn; nogle dele er små nok til at blive slugt og forårsage kvælning.
- Beskyt det mod:
 - ekstreme temperaturer;
 - stød og fald
 - forurening og støv

Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, 518118 Shenzhen, Guangdong, Kina. Udviklet for Montex Swiss AG, Schweiz

EU REP **Autoriseret repræsentant i EU:** CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/
Horacio Lengo No 18, CP 29006, Malaga, Spanien.

IM-PDT500-EN-V01 Udgivelsesdato: 09.09.2024

