

neno[®]

denti

BRUGERMANUAL



Kære Kunde,

tak fordi du har købt NENO DENTI. Det produkt, du har modtaget, er en elektrisk tandbørste til børn. Denne enhed bruges til børstning af tænder og opretholdelse af mundhygiejne.

Før du bruger enheden skal du læse brugsanvisningen.

1. SIKKERHEDSREGLER

1. Brug ikke enheden, hvis du ikke forstår brugsanvisningen eller de sikkerhedsregler, der er nævnt i denne brugsanvisning. Forkert brug af enheden kan beskadige den.
2. Skil produktet ikke ad. Dette kan forårsage beskadigelse af produktet, elektrisk stød og annullere garantien.
3. Brug ikke andet tilbehør end det, der anbefales af producenten.
4. Brug ikke brandfarlige eller eksplosive stoffer til at rengøre produktet.
5. Dette produkt er kun beregnet til børstning af tænder og massage af tandkød. Brug ikke enheden til andre formål.
6. Stop med at bruge enheden, hvis den er synligt beskadiget.
7. Sæt ikke produktet i vand. Dette kan forårsage en funktionsfejl og kan resultere i brand, elektrisk stød eller eksplosion.
8. Hold enheden væk fra beholdere med vand, såsom badekar eller håndvask.
9. Udskift ikke enhedens batteri, når dine hænder er våde.
10. Brug ikke gamle og opbrugte batterier i enheden.
11. Vær opmærksom på batteriets polaritet, når du indsætter dem i enheden.
12. Anbring ikke enheden i rum med høj luftfugtighed eller høj temperatur, f.eks. badeværelser.
13. Fjern batteriet fra enheden, hvis du ikke skal bruge det i lang tid for at undgå risiko for brand.
14. Hvis din tandpasta indeholder peroxider eller bicarbonater (ofte fandt i tandblegende tandpastaer), skal du vaske enheden grundigt efter brug for at undgå beskadigelse af plastrummet.
15. Hvis brugen af enheden forårsager ubehag for barnet eller blødende tandkød, skal du kontakte din tandlæge inden yderligere brug.
16. Enheden er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske, kognitive eller mentale evner eller som mangler erfaring eller viden, herunder børn. Hvis en sådan person ønsker at bruge enheden, skal han eller hun være under opsyn eller instrueret i brugsanvisningen af den person, der er ansvarlig for dem.


17. Enheden er ikke et legetøj - hold den uden for børns rækkevidde, så de ikke bruger den uden opsyn af voksne.
18. Enheden er beregnet til personlig hygiejne og bør ikke bruges af flere mennesker på tandlægeklinikker.

2. BESKRIVELSE AF ENHEDEN




3. SÆTTETS INDHOLD

1. Børste
2. Hoved med børste
3. Brugervejledning
4. Massageapparater:
 - a. Gummihoved til massage af tandkød
 - b. Gummihoved til tunge
 - c. Gummihoved til rengøring mellem tænder

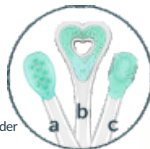

4. STRØMFORSYNING

Enheden kræver 1 stk. AAA-batteri for at fungere korrekt. Skru dækslet i bunden af enheden af for at få adgang til batterirummet. Batterirummets dæksel holdes på plads med en skrue, så barnet ikke har adgang til enhedens strømforsyning. Skru dækslet af med en skruetrækker, og isæt AAA-batteriet i henhold til nedenstående diagram.

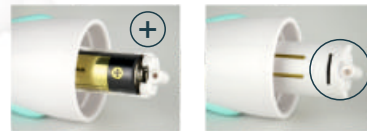

Skrue batteridækslet tilbage på plads. Sæt dækslet på plads igen, og skru det fast. Tappen på dækslet skal være under pilen på huset, inden det skrues på, og under prikken, efter at det er skruet på.



5. BRUG AF ENHEDEN

1. Placer hovedet med børsten på plastdelen af håndtaget med lampen.
2. Tryk på tandbørstens tænd/sluk-knap for at tænde for enhedens belysning.
3. Klem tandpastaen ud på børsten.
4. Pres tandbørsten forsigtigt mod dine tænder og tandkød.

5. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for tandbørsten vibration og begynde at børste tænderne. Børst alle dele af dit barns tænder grundigt.
6. Hvert 30. sekund af børstningen holder børsten pause i 1 sekund for at give brugeren mulighed for at skifte børstested. Korrekt tandbørstning skal tage i alt 2 minutter. Enheden slukker automatisk efter 2 minutter.
7. Når du er færdig med at børste tænder, skal du slukke for tandbørsten ved at trykke på tænd/sluk-knappen igen.
8. Efter tandbørstning skal du vaske tandbørsten under rindende vand. Ryst eventuelt resterende vand fra børstens hår og brug en blød klud til at tørre enhedens håndtag af.
9. Når du ikke bruger børsten, skal du holde den lodret.

BEMÆRK - for at undgå at sprøjte skum fra tandpastaen skal du slukke for enheden, inden du tager den ud af munden. Udskift børstehovedet hver tredje måned af hensyn til dit barns hygiejne og sikkerhed.

6. VEDLIGEHOLDELSE AF DIN ENHED

1. RENGØRING AF BØRSTEN

- a. Vask børstens hoved og børstehårene efter brug af enheden, og lad dem tørre naturligt.
- b. Tryk ikke fingrene på hårene eller træk dem ud. Dette kan deformere børsten og ødelægge den.
- c. Tør håndtaget af med en blød klud, og lad det tørre naturligt.
- d. Nedsænk håndtaget ikke i vand.
- e. Brug ikke vand varmere end 40°C eller ætsende rensningsmidler til at rengøre enheden.

2. FAQ

Q: Vibrationer svækkes under brug.

A: Din tandbørste presser for hårdt mod dine tænder. Den skal røre let ved dine tænder.

7. SPECIFIKATION

Strømkilde:	1 X AAA-batterier
Batteri-liv:	Et batteri kan vare i 150 dage.
Vandtæt:	IPX7
Nylonbørster:	Ja
Strøg pr. minut:	17000
Indbygget timer:	Ja
Indbygget LED-lys:	Ja
Produkt størrelse:	149x28x28mm
Vægt:	28 g

8. GARANTI

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://neno.pl/gwarancja>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: <https://neno.pl/kontakt>

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, jego akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą/mi przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

Producent:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b
31-752 Kraków
Polska

Wyprodukowano w P.R.C.



neno[®]
www.neno.pl
inspired by Children,
designed by Parents