

nenorTM

due

OHJEKIRJA



Hyvä Asiakas,

Ostamasi Neno Due -laite on sähkökäyttöinen rintapumppu äidinmaidon pumppaukseen synnytyksen jälkeen.

Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.

1. VAROTOIMENPITEET

1. Älä käytä rintapumppua raskauden aikana - se voi johtaa ennenaikaiseen synnytykseen.
2. Älä käytä laitetta, jos sinulla on kroonisia sairauksia tai yliherkkyyttä, jolloin rintapumpun käyttö voi aiheuttaa kipua.
3. Varmista ennen jokaista laitteen käyttöä, ettei mikään sen osista ole vaurioitunut. Älä käytä rintapumppua, jos jokin sen osista on näkyvästi vaurioitunut.
4. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
5. Hygieniasyistä vain yksi henkilö saa käyttää rintapumppua.
6. Pidä laitteen pumppausosa poissa vedestä.
7. Vältä laitteen altistumista mekaanisille vaurioille, kuten putoamiselle.
8. Pidä rintapumpun silikoniosat poissa kuumilta pinnoilta vääristymien välttämiseksi.
9. Aina kun aiot säilöä maitoa, rintapumppu on puhdistettava ja desinfitoitava.
10. Älä puhdista koneen osia hankaavilla puhdistusaineilla.
11. Älä yritä korjata rintapumppua itse - se mitätöi takuun.
12. Jos laitteen käyttö aiheuttaa kipua tai vakavaa epämukavuutta, katkaise laitteesta virta ja ota pumppu pois rinnasta.
13. Putki ei vaadi pesua usein. Varmista, että letku on kuiva ennen jokaista käyttöä. Märkä letku voi vahingoittaa laitetta.
14. Älä kytke laturia jännitteeseen, joka on korkeampi kuin teknisissä tiedoissa määritelty.

2. TOIMINNOT

1. Smart-laite:

- a. 6 stimulointi-tasoa sekä 9 tasoa ravinnon pumppaustilaa,
- b. 2-vaiheinen pumppausteknologia: stimulointi ja pumppaus,
- c. 4-vaiheinen smart-toiminto: stimulointi/pumppaus/automaatti/muisti.

2. Design estää maidon takaisinvirtauksen:

Suljettu syöttöjärjestelmä varmistaa, että maito ei virtaa takaisin pumpun kiertoon, pitää ruoan tuoreena ja estää infektoita.

3. Hellävarainen, silikonityyny rinnalle:

Joustava, herkkä rintatyyny on mukava, lievittää painetta ja auttaa hieromaan rintoja maidon virtauksen parantamiseksi.

4. Hiljainen ja kevyt:

Rintapumppu on hiljainen ja sitä voi käyttää huomaamattomasti kaikkialla. Suunniteltu liikkuville äideille, joiden on tyhjennettävä maito useita kertoja päivässä.

5. Helppo koota ja puhdistaa:

Rintapumpussa on vain viisi osaa kokoonpanoa ja puhdistusta varten, mikä tekee siitä erityisen helppokäyttöisen.

6. Älykäs kosketusnäyttö:

Digitaalinen näyttö, jossa on muistia suoritetuista ruokavalioista ja ajastin, jonka avulla voit helposti seurata laitteen toimintaa ja ohjata sen käyttöä helposti.

7. USB-C-portilla varustettu akku:


Tehokas litiumioniakku, joka tukee laitteen käyttöä jopa 2 tuntia. Liitä laite virtalähteeseen USB-kaapelilla akun lataamiseksi.

8. BPA-vapaa rintapumppu:

Rintapumppu ja sen lisävarusteet on valmistettu BPA-vapaista materiaaleista. Rintapumppu on yhteensopiva useimpien saatavilla olevien tuttipullojen kanssa.

3. OSAT

- A. Kansi x2
- B. Suppilo x2
- C. Liitos x2
- D. Tiivisteen suojus x2
- E. Tiiviste x2
- F. Venttiili x2
- G. Maitopullo x2
- H. Pulloteline x2
- I. Letku x2
- J. Laitteen latauskaapeli
- K. Pumpauslaite

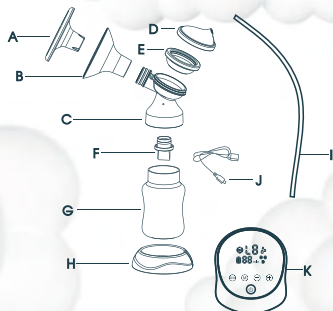

4. TOIMINTATILOJEN KUVAUS

Ruokailutila	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
Imuteho (kPa)	18,9	21,5	24,5	30,7	33,8	36,9	38,9	40,9	42,9
Tahdistustila	L1	L2	L3	L4	L5				
Imuteho (kPa)	3,9	9,7	12,8	17,4	20,5				

5. KUVAKKEIDEN JA PAINIKKEIDEN KUVAUS

1. Virtapainike:

Kytke rintapumppu päälle tai pois päältä pitämällä painiketta 2 sekunnin ajan.

2. Tilan vaihto:

Paina painiketta vaihtaaksesi tilaa. Toimintatiloja on kolme. Laite siirtyy automaattisesti stimulaatitilasta ruokailutilaan 2 minuutin kuluttua. Laitteessa on muistitoiminto ja ajastin. Aiemmin tehdyt asetukset aktivoituvat automaattisesti kun käytät laitetta seuraavan kerran. Automaattinen rintapumppu sammuu 30 minuutin käytön jälkeen.

3. Imuteho:

+ lisää imutehoa; - imuvoiman vähennys (stimulaatitila: L1-L5; ruoan saantitila: L1-L9).

4. Akun tila:


Ilmaisee akun virran määrän. Lataa rintapumppu, jos akun varaus on heikko.

5. Laitteen toiminnan kesto:

Ilmaisee kuinka kauan olet käyttänyt rintapumppua. Laite sammuu automaattisesti 30 minuutin käytön jälkeen.

6. Rintapumpun kaksinkertainen käyttö/yksittäinen käyttö:

Kytke toinen rintapumppu päälle tai pois päältä painamalla painiketta. Näytössä näkyy onko yksi tai molemmat rintapumput päällä.

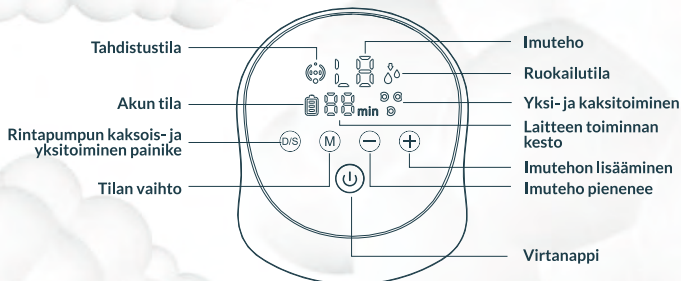

6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM



1. Irrota maitopullo liittimestä.
2. Irrota venttiili liittimestä vetämällä venttiiliä alaspäin.
3. Poista suppon korkki ja vedä suppilo liittoksesta.
4. Irrota liitos tiivisteestä ja tiivistekannesta.

7. PUHDISTUS

Pesu ja desinfiointi ovat kaksi erilaista toimintaa. Ne on tehtävä erikseen vauvasi suojaamiseksi ja varmistaaksesi, että rintapumppu toimii oikein.

Pesu – laitteen pinnan pesu ja epäpuhtauksien poistaminen.

Desinfiointi – organismien tuhoaminen, kuten bakteerien tai virusten, joita saattaa olla läsnä laitteen pinnalla.

	Suppilo	Rintapumpun elementit (liitos, tiiviste, tiivistekansi)	Pullo ja tutti
Ennen ensimmäistä käyttöä	Pesu	Pesu	Pesu
Jokaisen käytön jälkeen	Pesu ja puhdistaminen	Pesu ja puhdistaminen	Pesu ja puhdistaminen
Kerran päivässä	Puhdistus	Puhdistus	Puhdistus

8. RINTAPUMPUN KOKOAMINEN

1. Pese kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä, ennen kuin kosketat rintapumppua ja rintaa.
2. Kiinnitä tiiviste ja tiivistekansi liitokseen.
3. Aseta suppilo liitoksen päälle.
4. Aseta venttiili liitokseen ja kierrä maitopullo liitokseen kiertämällä sitä myötäpäivään loppuun asti.
5. Liitä letku tiivistekanteen.
6. Liitä letkut pumppauslaitteen oikeaan porttiin.




Neuvoja:

1. Tarkista ennen jokaista käyttöä, ettei rintapumpun komponentit ole vaurioituneet. Korvaa vaurioituneet osat tarvittaessa uusilla.
2. Tarkista osien puhtaus aina ennen laitteen käyttöä.
3. Varmista, että kaikki laitteen osat ovat kuivia ennen käyttöä, ettei rintapumppu vahingoittuisi.

9. RINTAPUMPUN LATAAMINEN

Lataa rintapumppua 2 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä liittämällä se virtalähteeseen USB kaapelilla. Näytön akkukuvake on täynnä, kun lataus on päättynyt.

10. RINTAPUMPUN KÄYTTÖ

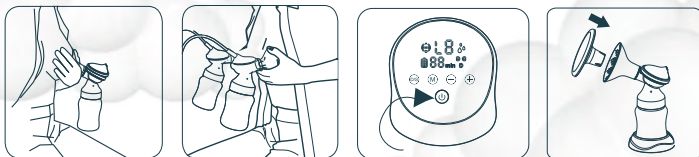

1. Aseta suppilo rintaan nänni maitoletkukanavan sisään.
2. Paina suppiloa ja rintapumpun liitäntää rintaan peukalolla ja etusormella. Tue rintaa kädelläsi.
3. Kytke rintapumppu päälle painamalla virtapainiketta ja valitse sinulle sopiva käyttötila.
4. Sammuta rintapumppu käytön jälkeen painamalla virtapainiketta ja aseta rintapumpun kansi, suojaamaan laitetta pölyltä.
 - a. Rintapumppu alkaa toimia stimulaatiotilassa. Aseta itsellesi sopiva imutaso käyttämällä +/- painikkeita**Stimulointitila** – nopea pumppaus, joka jäljittelee vauvan luonnollista äidinmaidon imemistä ja stimuloi maidon virtausta.
 - b. 2 minuutin kuluttua rintapumppu siirtyy automaattisesti ruokintatilaan. Mukauta imutehoa +/- painikkeilla löytääksesi itsellesi mukavimman imutason. Jos maitoa alkaa tulla rinnastasi ennen kahden minuutin kuluttua, paina tilakytkintä siirtyäksesi rintamaidon tyhjennystilaan manuaalisesti.**Pumppaustila** – hitaampi pumppaus, joka imee varovasti ja tehokkaasti maitoa rinnasta.
 - c. Lisää pumppaustilassa imutehoa, kunnes tunnet lievää epämukavuutta (ei kipua) ja vähennä sitten imutehoa yhdellä asteella.

11. FAQ

1. **Laite ei käynnisty:** varmista, että rintapumppu on kytketty toimivaan pistorasiaan. Jos rintapumpulla ei ole virtälähdettä, sen näyttö ei käynnisty eikä virheilmoituksia tule näkyviin.
2. **Laite ei pumpppaa tai pumpppaa huonosti:** varmista, että kaikki rintapumpun osat on asetettu oikein. Irrota rintapumppu ja varmista, että kaikki sen osat ovat puhtaat ja ehjät. Kokoa rintapumppu uudelleen ohjeiden "Rintapumpun kokoaminen" – kohdan mukaisesti.
3. **Rinnasta vapautuu enemmän maitoa kuin pulloon mahtuu:** sammuta rintapumppu ja irrota se virtälähteestä. Pyyhi kostealla (ei märällä) liinalla rintapumppu. Kun kaikki laitteen osat ovat kuivia, asenna ne takaisin.

12. PITKÄAIKAINEN VARASTOINTI

1. Rintapumpussa on sisäänrakennettu akku. Laite siirtyy vaurioilta suojaamisen tähden varastointitilaan pitkän käyttämättömyyden jälkeen. Tilasta poistutaan liittämällä laite virtälähteeseen ladattavaksi 2 tunniksi.
2. **Ennen kuin asetat rintapumpun pitkäksi aikaa, varmista, että:**
 - a. Kaikki rintapumpun osat ovat puhtaat.
 - b. Pumppauslaite puhdistetaan.
 - c. Laitteen akku on ladattu täyteen.

13. PUHDISTUSOHJEET

Valmista: mietoa saippuaa tai puhdistusnestettä, puhdas astiankuivauspyyhe, juomavettä.
Pestävät tai desinfioitavat osat:

- Suppilo,
- Maitopullo,
- Liitin,
- Venttiili,

- Tiivistekansi,
- Tiiviste,
- Suppilon kansi.

VAROITUS:

- Pese kaikki osat, jotka ovat olleet suorassa kosketuksessa maidon kanssa, erikseen heti käytön jälkeen. Näin vältät sakan muodostumisen ja bakteerien kehittymiseltä laitteessa.
- Käytä puhdistukseen vain juomavettä (hanasta tai pulloitettua) laitteet.
- Älä käytä venttiilien puhdistukseen pieniä välineitä, kuten harjoja. Varo läpäisemästä venttiiliä.
- Pura, pese ja huuhtelee kaikki laitteen välittömässä maitoon kosketuksessa olleet osat (paitsi pumppauslaitetta).

1. Rintapumpun osien puhdistus:



Vaihe 1 - Huuhtelee irrotetut osat (jotka ovat olleet kosketuksissa rintasi ja maidon kanssa) kylmässä vedessä mahdollisten maitojäämien ja sakan huuhtelemiseksi.

Vaihe 2 - Liota lämpimässä saippuavedessä 5 minuuttia, pese sitten ja huuhtelee.

Vaihe 3 - Anna osien kuivua luonnollisesti. Säilytä laitteen kuivia osia viileässä ja kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä.

2. Rintapumpun osien sterilointi (ennen ensimmäistä käyttöä ja käytön jälkeen):



Vaihe 1 - Täytä kattila riittävällä määrällä vettä, jotta se peittää kaikki puretun laitteen osat. Kuumenna vesi kiehuvaan ennen kuin laitat siihen puretun rintapumpun.

Vaihe 2 - Aseta laitteen osat kiehuvaan veteen 10 minuutiksi.

Vaihe 3 - Anna laitteen osien kuivua luonnollisesti. Säilytä kuivia osia viileässä ja kuivassa paikassa, kun laitetta ei käytetä.

3. Pumppauslaitteen puhdistaminen:

Valmista: mietoa saippuaa tai puhdistusainetta, puhdas astiankuivauspyyhe.

Puhdistettava osa: pumppauslaite.



VAROITUS:

- Älä upota pumppauslaitetta veteen.
- Älä huuhtelee pumppauslaitetta vedellä.
- Käytä pumppauslaitteen näytön puhdistamiseen vain kosteaa, pehmeää liinaa miedolla saippualla tai puhdistusaineella. Vahvemmat puhdistusaineet tai hankaavat aineet voivat vahingoittaa näyttöä.

14. TEKNISET TIEDOT

Lähtöteho: 110-240V 50-60Hz

Syöttöteho: 5V 2A

Paino: 785 g

Mitat: 105 x 125 x 52 mm

Akun kapasiteetti ja tyyppi: 3.7 V 2000 mAh Li-Ion

15. TAKUUKORTTI

Tuotteella on 24 kuukauden takuu.

Takuuehdot löytyvät osoitteesta: <https://nenopl/gwarancja>

Yksityiskohtaista tietoa, yhteystiedot ja verkkosivuston osoite löytyvät osoitteesta <https://nenopl/kontakt>

*Teknisiä tietoja ja pakkauksen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä.*



Ylivievatun roskakorin sijoitettu symboli osoittaa, että tarpeettomia sähkö- tai elektroniikkalaitteita, niiden lisävarusteita (kuten virtalähteet, kaapelit) tai komponentteja (esim. Akut, jos mukana) ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Asianmukaiset toimet, kun on tarpeen hävittää laitteet tai komponentit (esim. Paristot) tai niiden kierrätys tarkoittaa laitteen viemistä keräyspisteeseen, jossa se hyväksytään ilmaiseksi. Hävittäminen edellyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19/EU) ja paristoja ja akkuja koskevan direktiivin (2006/66/EY) uudelleenlaadintaa. Laitteen asianmukainen hävittäminen estää ympäristön pilaantumisen. Laitteiden keräyspisteistä tiedot antaa asianomaiset paikalliset viranomaiset. Virheellisestä jätehuollosta määrätään tietyllä alueella voimassa olevan lain mukaiset seuraamukset.

Valmistaja:

KGK Trade sp.z o.o. sp. k.
Ujastek 5b
31-752 Krakova
Puola

Valmistettu Kiinassa



nenopl
www.nenopl
*inspired by Children,
designed by Parents*

The background of the entire image is composed of several clusters of white, three-dimensional spheres of varying sizes, arranged to resemble soft, fluffy clouds. These clusters are positioned in the top-left, top-right, middle-left, middle-right, and bottom-left areas, leaving the center-right area clear for the text.

nenorTM

*inspired by Children,
designed by Parents*