

nenno

PRIMO



05. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING SE FIG. C

1. Ta bort locket från bröstskyddet före varje användning.
2. Dra nedåt på ventilen för att ta bort den från kontakten.
3. Separera kontakten från sugskålen och suglocket.

06. RENGÖRING

Rengöring och sanering är två olika aktiviteter. De måste göras separat för att skydda ditt barn och se till att bröstpumpen fungerar som den ska.
Rengöring - tvättar enhetens yta och tar bort smuts.
Sanering - dödar organismer som bakterier eller virus som kan finnas på apparatens yta.

	Bröstskydd	Bröstpump element (kontakt, suglock, sugskål)	Flaska och spene
Före första användning	Rengöring och sanering	Rengöring och sanering	Rengöring och sanering
Efter varje användning	Rengöring	Rengöring	Rengöring
En gång om dagen	Sanering	Sanering	Sanering

07. MONTERING AV BRÖSTPUMPEN

1. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan du rör vid bröstpumpen och bröstet.
2. Sätt fast bröstskyddet, sugskålen och suglocket på kontakten.
3. Placera ventilen i kontakten och skruva fast mjölkflaskan på kontakten genom att vrida den medurs tills den slutar att vrida.

Tips:


- a. Kontrollera bröstpumpens komponenter för skador före varje användning. Ersätt skadade delar med nya vid behov.
- b. Kontrollera alltid att elementen är rena innan du använder maskinen.
- c. För att undvika skador på bröstpumpen ska du se till att alla delar är torra innan du använder den.

08. LADDNING AV BRÖSTPUMPEN

Före första användningen ska du ladda bröstpumpen i 2 timmar genom att ansluta den till strömförsörjningen med hjälp av USB-kabeln. Batterikonen på displayen är full när laddningen är klar.

09. ANVÄNDNING AV BRÖSTPUMPEN

SE FIG. D

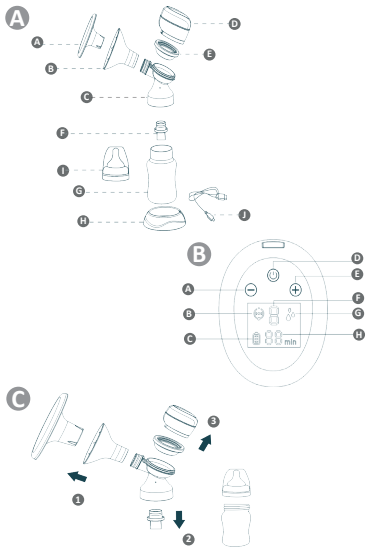


1. Placera bröstskölden på bröstet så att bröstvärtan är inne i dräneringskanalen.
2. Tryck bröstskyddet och kontakten mot bröstet med tummen och pekfinger. Stöd bröstet med handflatan.
3. Slå på bröstpumpen genom att trycka på strömbrytaren och välj det driftläge som passar dig.
4. Tryck på strömbrytaren för att stänga av bröstpumpen efter användning och placera locket på bröstskyddet för att skydda maskinen från damm.
 - a. Bröstpumpen börjar arbeta i stimuleringsläget. Ställ in sugkraften till en nivå som är bekväm för dig med hjälp av +/- knapparna.
Stimuleringsläge - snabb pumpning som efterliknar barnets naturliga sugning av bröstmjölk och stimulerar mjölkflödet.
 - a. Efter 2 minuter aktiverar bröstpumpen automatiskt expressionsläget. Justera sugnivån med hjälp av +/- knapparna för att hitta den högsta sugnivån som är bekväm för dig. Om mjölk börjar rinna ut ur bröstet innan två minuter har gått, tryck på lägesknappen för att manuellt byta till uttrycksläget.
 - Expressionsläge** - långsammare pumpning som försiktigt och effektivt suger upp bröstmjölk.
 - b. Öka sugkraften i expressionsläget tills du känner ett lätt obehag (inte smärta) och minska sedan sugkraften med en grad.

10. VANLIGA FRÅGOR

1. **Maskinen startar inte:** Kontrollera att bröstpumpen är ansluten till ett fungerande eluttag. Om bröstpumpen inte har någon strömkanal tänds inte displayen och inget felmeddelande visas.
2. **Ingen/dålig sugning:** Kontrollera att alla delar av bröstpumpen är korrekt placerade. Ta isär bröstpumpen och kontrollera att alla delar är rena och oskadade. Sätt ihop bröstpumpen igen enligt instruktionerna i avsnittet "Montering av bröstpumpen".
3. **Mer mjölk har runnit ut ur bröstet än vad flaskan kan rymma:** stäng av bröstpumpen och koppla ur den. Använd en fuktig (inte våt) trasa för att torka av bröstpumpen. När alla delar av apparaten är torra sätter du ihop dem igen.

11. LÅNGTIDSLAGRING.

1. Bröstpumpen har ett inbyggt batteri. För att skydda mot skador går enheten in i lagringsläge efter en längre tids inaktivitet. För att stänga av lagringsläget ansluter du enheten till strömmen och laddar den i 2 timmar.
2. Innan du lägger undan bröstpumpen för en längre tid ska du kontrollera att:
 - a. Alla delar av bröstpumpen är rena.
 - b. Du har rengjort pumpanordningen.

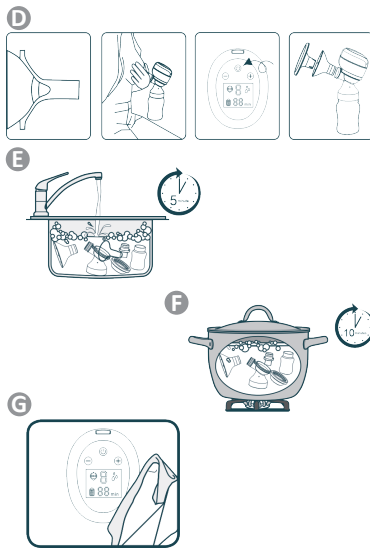

c. Enhetens batteri är helt laddat.

12. RENGÖRINGSANVISNINGAR

Förberedelse: mild tvål eller annat rengöringsmedel, ren diskhandduk, vatten av dricksvattenkvalitet.
Delar som måste tvättas eller desinficeras:
- Bröstskydd,
- Mjölkskål,
- Kontaktfont,
- Ventil,
- Sugkopp,
- Sugskål,
- Bröstsköld dammskydd.

VARNING:

- Tvätta alla delar som har varit i direkt kontakt med bröstmjölk omedelbart efter användning. Detta hjälper dig att undvika rester och bakterietillväxt i apparaten.
- Använd endast vatten av dricksvattenkvalitet (kranvatten eller flaskvatten) för att rengöra apparaten.
- När du rengör ventilen får du inte använda små instrument, t.ex. borstar. Var försiktig så att du inte genomborrar delen.
- Ta isär, tvätta och skölj alla delar av apparaten som har kommit i direkt kontakt med bröstmjölk (utom pumpen).

1. Rengöring av bröstpumpens komponenter (före första användning och efter varje användning):

SE FIG. E

Steg 1 - Ta isär apparaten och skölj alla delar som har kommit i kontakt med bröstet och mjölken i kallt vatten för att få bort rester av mjölk och eventuella rester.
Steg 2 - Blötlägg i varmt tvålatten i 5 minuter, tvätta och skölj sedan.
Steg 3 - Låt delarna lufttorka. Förvara de torra delarna på ett svalt och torrt ställe när du inte använder dem.

2. Sterilisering av bröstpumpens komponenter (före första användning och efter användning):

SE FIG. F

Steg 1 - Fyll grytan med tillräckligt med vatten för att täcka alla delar av den demonterade apparaten. Koka upp vattnet innan du sätter den utviktta bröstpumpen i den.
Steg 2 - Ligg apparatens delar i kokande vatten i 10 minuter.
Steg 3 - Låt delarna lufttorka. Förvara de torra delarna på ett svalt och torrt ställe när du inte använder dem.

3. Rengöring av pumpanordningen:

SÖK FIG. G

Förbered dig:
- mild tvål eller annat rengöringsmedel,
- rena diskhanddukar.

SE

BRUKSANVISNING

Kära kund,

Den enhet Neno Primo som du har fått är en elektronisk bröstpump. Den används för att ta ut bröstmjölk efter förlösningen.
Läs igenom anvisningarna innan du använder apparaten.

01. SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Använd inte bröstpumpen under graviditeten - det kan leda till för tidig förlösning.
2. Använd inte apparaten om du lider av kroniska sjukdomar eller överkänslighet som skulle göra det smärtsamt för dig att använda apparaten.
3. Före varje användning av apparaten ska du se till att ingen komponent är tydligt skadad. Använd inte bröstpumpen om någon av dess komponenter är skadad.
4. Håll apparaten borta från barn och djur.
5. Av hygieniska skäl bör endast en person använda bröstpumpen.
6. Håll den pumpade delen av apparaten borta från vatten.
7. Undvik att utsätta enheten för mekaniska skador genom att t.ex. tappa den.
8. Förvara bröstpumpens silikondelar borta från varma ytor för att undvika att de förvängs.
9. Förvara endast mjölk som har tappats ut med en ren och desinficerad bröstpump.
10. Rengör inte delar av apparaten med slipmedel.
11. Försök inte att reparera bröstpumpen själv - detta upphäver garantin.
12. Om användningen av apparaten orsakar smärta eller allvarligt obehag ska du stänga av den och flytta bröstpumpen bort från bröstet.
13. Rengör inte tuben för ofta och se till att den är torr innan du använder den. En våt slang kan skada apparaten.
14. Ladda inte enheten med en högre spänning än vad som anges i den tekniska specifikationen.

02. ELEMENTS

SE FIG. A

- A. Mössa
- B. Bröstskydd 24 mm
- C. Anslutning

Delar som behöver rengöras:

-pumpningsanordning.

VARNING:

- Doppa inte pumpanordningen i vatten.
- Skölj inte pumpanordningen med vatten.

- När du rengör displayen på pumpenheten ska du endast använda en fuktig, mjuk trasa med en mild tvål eller ett rengöringsmedel. Starkare rengöringsmedel eller slipmaterial kan förstöra displayen.

13. SPECIFIKATION

Uteffekt: 110-240V 50-60Hz | Ineffekt: 5V 1A | Vikt: 357 g | Mått: 84x64x63 mm | Batterikapacitet och typ: 3,7V 1400 mAh Li-Ion

14. GARANTIKORT/KLAGOMÅL

Produkten omfattas av en garanti på 24 månader.

Villkoren för garantin finns på följande adress: <https://nenno.pl/gwarancja>

Uppgifter, kontaktpunkter och webbadress finns på följande adress: <https://nenno.pl/kontakt>

Specifikationer och innehåll i satsen kan ändras utan föregående meddelande. Vi bär om ursäkt för eventuella oögheter.

- D. Pumpanordning
- E. Sugskål
- F. Ventil x2
- G. Mjölkskål
- H. Flaskhållare
- I. Flaskspene
- J. Laddningskabel
- K. Flasklockan

03. BESKRIVNING AV TRANSPORTSÄTT

Stimuleringsläge:

L1 - 5 kPa; L2 - 12 kPa; L3 - 17 kPa; L4 - 21 kPa; L5 - 25 kPa ;

Expressionsläge:

L1 - 21 kPa; L2 - 24 kPa; L3 - 27 kPa; L4 - 31 kPa; L5 - 37 kPa; L6 - 40 kPa; L7 - 42 kPa; L8 - 43 kPa; L9 - 45 kPa;
Tillåten skillnad är ± 5 kPa.

04. BESKRIVNING AV IKONER OCH KNAPPAR

SE FIG. B

- A. Minskning av sugförmågan
- B. Stimuleringsläge
- C. Batteriprocent
- D. Strömbrytare/lägesändringZwiekszenie sily odsysania
- E. Ökad sugförmåga
- F. Sugkraft
- G. Läge för uttryck
- H. Sessionens längd

1. Strömbrytaren:

Håll in den i 2 sekunder för att slå på eller av bröstpumpen.

2. Ändring av läge:

Tryck på knappen för att byta läge. Apparaten växlar automatiskt från stimulerings- till uttrycksläge efter 2 minuter. Apparaten kan spara inställningar och har en tidsräknare. När du slår på enheten, aktiveras inställningarna från tidigare användning av enheten automatiskt. Bröstpumpen stängs automatiskt av efter 30 minuters användning.

3. Sugkraft:

+ ökar sugkraften, - minskar sugkraften (stimuleringsläge: L1-L5, uttrycksläge: L1-L9).

4. Batteristatus:

Visar hur mycket batteri som återstår. Ladda bröstpumpen om batteriet är svagt. Anger hur länge du har använt bröstpumpen. Apparaten stängs av automatiskt efter 30 minuters användning.

nenno

SE



Det överkryssade sopbältesymbolen indikerar att obrukade elektriska eller elektroniska enheter, tillbehör (som strömförsörjning, ledningar) eller komponenter (för exempelvis batterier, hvis inkluderat) inte kan kastas tillsammans med hushållsavfallet. För å avhända enheterna eller dens komponenter (för exempelvis batterier), över enheten till insamlingssteden, where det vil bli akseptert vet (2012/19/EU) og direktivet om batterier og akkumulatorer (2006/66 / EC). Riktig avhending er underlagt den omarbejdede versionen af WEEE-direktivet. Information om indsamlingsstederne til anlegget udstedes af de kompetente lokale myndigheder. Fehåndtering af affald er underlagt straffer fastsat af gældende lov i det givte område!

Producent/ Manufacturer:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b
31-752 Cracow
Poland
Made in PRC

