

nenorTM

due

ANVÄNDARMANUAL



Bästa kund,

Neno Due är en elektrisk bröstpump avsedd för att pumpa bröstmjolk efter förlossning.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda anordningen.

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Använd inte bröstpumpen om du är gravid - detta kan nämligen leda till en för tidig förlossning.
2. Använd inte anordningen om du lider av kroniska sjukdomar eller är överkänslig så att användning av bröstpumpen skulle kunna göra ont.
3. Kontrollera att inga element är skadade innan varje användning. Använd inte bröstpumpen om något element uppenbarligen är skadat.
4. Förvara anordningen utom räckhåll för barn och djur.
5. Av hygieniska skäl får bröstpumpen användas av endast en person.
6. Håll pumpdelen borta från vatten.
7. Utsätt inte anordningen för mekaniska skador t.ex. till följd av ett fall.
8. Förvara bröstpumpens silikondelar borta från heta ytor för att förebygga eventuella deformationer.
9. Varje gång du tänker förvara utpumpad mjolk ska du först rengöra och desinficera bröstmjölken.
10. Rengör inte anordningens delar med slipmedel.
11. Försök inte laga bröstpumpen på egen hand - då slutar garantin gälla.
12. Om du känner smärta eller starkt obehag vid användning ska du stänga av och avlägsna bröstpumpen från bröstet.
13. Röret behöver inte tvättas alltför ofta. Kontrollera att röret är torrt innan varje användning. Ett vått rör kan orsaka skador.
14. Ladda inte anordningen med högre spänning än vad som anges i specifikationen.

2. FUNKTIONER

1. Smart anordning:

- a. 6 stimuleringsnivåer och 9 pumpnivåer,
- b. 2-fasteknologi för mjolkepumpning: stimulering och pumpning,
- c. smart 4-fasfunktion: stimulering/ pumpning/ automat/ minne.

2. Utformningen förhindrar mjölken från att flyta tillbaka:

Det slutna mjolkepumpningssystemet förhindrar mjölken från att flyta tillbaka i pumpen. På så sätt hålls mjölken färsk och infektioner förebyggs.

3. Mjuk brösttratt av silikon:

Den flexibla mjuka brösttratten är bekväm, minskar trycket och gör det lättare att massera bröstet för bättre mjolkflöde.

4. Tyst och lätt:

Bröstpumpen är tyst så att du kan använda den var du än är. Den är avsedd för mammor som behöver pumpa mjolk ett par gånger om dagen mellan de är ute och springer ärenden.

5. Lätt att montera och rengöra:

Bröstpumpen har endast fem montage- och rengöringsdelar och är därmed väldigt enkel att använda.

6. Smart pekskärm:

Den digitala skärmen som sparar mjolkepumpningstillfällena och har en timer gör det enkelt att följa anordningens arbete och underlättar användning.

7. Ackumulator med en USB-C-port:


Ett effektivt litium-jonbatteri som håller i upp till 2 timmar. Anslut anordningen till elnätet med USB-sladden för att ladda ackumulatoren.

8. Bröstpump utan BPA:

Bröstpumpen och dess tillbehör är tillverkade av material som inte innehåller BPA. Bröstpumpen är kompatibel med de flesta nappflaskor.

3. ELEMENT

- A. Pokrywka x2
- B. Lejek (średnica 24 mm) x2
- C. Złączenie x2
- D. Pokrywka uszczelki x2
- E. Uszczelka x2
- F. Zawór x2
- G. Butelka na mleko x2
- H. Podstawka na butelkę x2
- I. Rurka x2
- J. Przewód do ładowania urządzenia
- K. Urządzenie pompujące

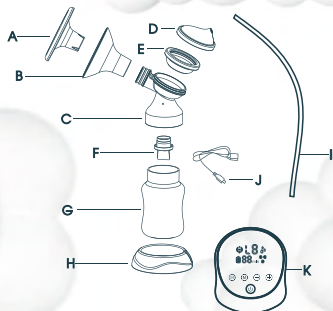

4. TOIMINTATILOJEN KUVAUUS

Matplats	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
Sugkraft (kPa)	18,9	21,5	24,5	30,7	33,8	36,9	38,9	40,9	42,9
Synkroniseringsläge	L1	L2	L3	L4	L5				
Sugkraft (kPa)	3,9	9,7	12,8	17,4	20,5				

5. BESKRIVNING AV IKONER OCH KNAPPAR

1. Strömförsörjningsknapp:

Håll ned i 2 sekunder för att slå på eller stänga av bröstpumpen.

2. Lägesbyte:

Tryck knappen för att byta läge. Det finns tre olika arbetslägen. Anordningen övergår automatiskt från stimuleringsläget till mjölkpumpningsläget efter 2 minuter. Anordningen kan spara inställningar och har en timer. Nästa gång du använder anordningen aktiveras de tidigare inställningarna. Bröstpumpen stängs av automatiskt efter 30 minuters användning.

3. Pumpkraft:

+ ökar pumpkraften; - minskar pumpkraften (stimuleringsläge: L1-L5; mjölkpumpningsläge: L1-L9).

4. Batteristatus:

Indikerar batterinivån. Ladda bröstpumpen om batterinivån är låg.

5. Anordningens arbetstid:

Indikerar hur länge du har använt bröstpumpen. Anordningen stängs av automatiskt efter 30 minuters användning.

6. Användning av en/två bröstpumpar:

Tryck knappen för att slå på eller stänga av den andra bröstpumpen. Du kan se på displayen om en eller två bröstpumpar är påslagna



6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



1. Skruva loss mjölkflaskan från anslutningen.
2. Dra ned ventilen för att koppla bort den från kontakten.
3. Ta bort trattlocket och dra tratten ur fogen.
4. Lossa skarven från packningen och packningslocket.

7. RENGÖRING

Tvättning och sanering är två olika aktiviteter. De måste göras separat för att skydda ditt barn och för att säkerställa att bröstpumpen fungerar som den ska.


Tvättning - tvätta ytan på enheten och ta bort föroreningar.

Dekontaminering - dödar organismer som bakterier och virus som kan finnas på enhetens yta.

	Tratt	Delar av bröstpumpen (fog, packning, packningskåpa)	Flaska och spene
Före första användning	Tvättning	Tvättning	Tvättning
Efter varje användning	Tvättning och sanering	Tvättning och sanering	Tvättning och sanering
En gång om dagen	Sanering	Sanering	Sanering

8. MONTAGE AV BRÖSTPUMPEN

1. Tvätta händerna noggrant med tvålatten innan du rör vid bröstpumpen och bröstet.
2. Anslut tätningen och dess lock till kopplingen.
3. Placera tratten på kopplingen.
4. Placera ventilen i kopplingen och skruva fast mjölkflaskan till kopplingen genom att vrida den medurs tills det gör motstånd.
5. Koppla röret till tätningens lock.
6. Koppla röret till rätt port på pumpanordningen.

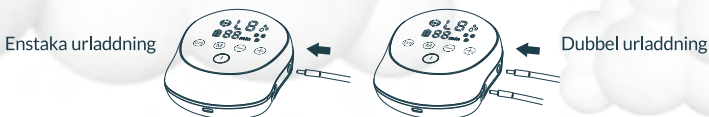

Råd:

1. Kontrollera om bröstpumpens delar inte är skadade innan varje användning. Byt ut skadade element vid behov.
2. Kontrollera om elementen är rena innan varje användning.
3. För att förhindra att bröstpumpen skadas, se till att alla dess element är torra innan du börjar använda den.

9. LADDNING AV BRÖSTPUMPEN

Ladda bröstpumpen i 2 timmer innan första användning genom att ansluta den till elnätet med USB-sladden. Batteriikonen kommer att bli full när laddningen har slutförts.

10. UŻYWANIE LAKTATORA



1. Placera tratten på bröstet så att bröstvårtan befinner sig innanför avledningskanalen.
 2. Tryck tratten och bröstpumpens koppling mot ditt bröst med tummen och pekfinger. Håll bröstet med handen.
 3. Slå på bröstpumpen genom att trycka strömförsörjningsknappen och välj lämplig arbetsläge.
 4. Tryck strömförsörjningsknappen för att stänga av bröstpumpen och placera locket på tratten så att det inte samlas damm på anordningen.
 - a. Bröstpumpen startar i stimuleringsläget. Välj passande sugintensitet med hjälp av +/- knapparna.
- Stimuleringsläge** - snabb pumpning som imiterar naturligt diande och stimulerar mjölkflödet.
- b. Efter 2 minuter aktiverar bröstpumpen automatiskt mjölkpumpningsläget. Anpassa sugintensiteten med hjälp av +/- knapparna för att hitta den högsta sugintensiteten som är bekväm för dig. Om mjölken börjar komma ur bröstet innan två minuter har gått, tryck på knappen för lägesbyte för att byta till manuell mjölkpumpning.
- Mjölkpumpningsläge** - långsammare pumpning, mjölken sugs ur försiktigt och effektivt.
- c. Vid mjölkpumpningsläget ska du öka sugintensiteten till du känner lätt obehag (inte smärta) och minska då intensiteten med en nivå.

11. FAQ

1. Anordningen startas inte:

Kontrollera att bröstpumpen är ansluten till ett fungerande eluttag. Om bröstpumpen inte har någon kraftkälla, aktiveras inte displayen och inget felmeddelande dyker upp.

2. Utebliven/svag pumpning:

Kontrollera att bröstpumpens samtliga delar är rätt placerade. Plocka isär bröstpumpen och kontrollera att alla element är rena och oskadade. Plocka ihop bröstpumpen enligt anvisningarna i avsnittet "Montage av bröstpumpen".

3. Det har kommit ut mer mjölk än vad som ryms i flaskan:

Stäng av bröstpumpen och koppla den ifrån elnätet. Använd en lätt fuktig (inte våt) trasa för att torka bröstpumpen. När alla element har torkat, plocka ihop den igen.

12. LÅNGVARIG FÖRVARING

1. Bröstpumpen har en inbyggd akkumulator. För att skyddas mot skador övergår anordningen till förvaringsläget efter att den varit inaktiv en längre tid. För att stänga av förvaringsläget anslut anordningen till elnätet och ladda den i 2 timmar.

2. Innan du lägger undan bröstpumpen för en längre tid kontrollera att:

- a. Bröstpumpens alla delar är rena.
- b. Pumpanordningen är rengjord.
- c. Anordningens akkumulator är fulladdad.

13. RENGÖRING

Förbered: mild tvål eller rengöringsmedel, ren disktrasa, dricksvatten.

Delar som ska tvättas eller desinficeras:

- Tratten,
- Mjölkflaskan,

- Kopplingen,
- Ventilen,
- Tätningshöljet,
- Tätningen,
- Trattens lock.

OBSERVERA:

- Alla delar som haft direkt kontakt med mjölken ska tvättas var för sig strax efter användning. På så sätt förebygger du att det bildas avlagringar och växer bakterier i anordningen.
- Använd endast dricksvatten (kran- eller flaskvatten) för att tvätta anordningen.
- Använd inte små föremål såsom borstar vid rengöring av ventiler. Akta så att du inte punkterar ventilen.
- Plocka isär, tvätta och skölj anordningens alla delar som haft direkt kontakt med mjölken (förutom pumpanordningen).

1. Rengöring av bröstpumpens delar:



Steg 1 - Skölj alla fränkopplade delar (som haft kontakt med bröstet och mjölken) i kallt vatten för att sälja bort mjölkrester och avlagringar.

Steg 2 - Doppa elementen i varmt tvålsvatten i 5 minuter, tvätta och skölj sedan.

Steg 3 - Låt elementen torka naturligt. Anordningens delar ska förvaras torrt och svalt när du inte använder dem.

2. Sterilisering av bröstpumpens delar (innan första användning och efter användning):




Steg 1 - Fyll kastrullen med tillräckligt mycket vatten för att täcka alla isärplockade delar.

Koka upp vatten innan du lägger in den isärplockade bröstpumpen.

Steg 2 - Lägg in anordningens delar i kokande vatten för 10 minuter.

Steg 3 - Låt elementen torka naturligt. Anordningens delar ska förvaras torrt och svalt när du inte använder dem.

3. Rengöring av pumpanordningen:

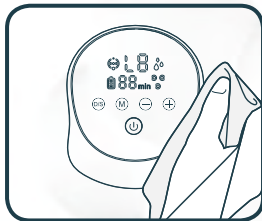

Förbered: mild tvål eller rengöringsmedel, ren disktrasa.

Delen som ska rengöras: pumpanordningen.

OBSERVERA:

- Doppa inte pumpanordningen i vatten.
- Skölj inte pumpanordningen med vatten.
- Använd endast en fuktig, mjuk trasa med mild tvål eller rengöringsmedel vid rengöring av pumpanordningens display. Starkare rengöringsmedel eller slipmedel skulle kunna förstöra displayen.

14. SPECIFIKATION

Uteffekt: 110-240V 50-60Hz

Ineffekt: 5V 2A

Vikt: 785 g

Mått: 105x125x52 mm

Batterivolym och typ: 3.7 V 2000 mAh Li-Ion

15. GARANTIKORT

Produkten omfattas av 24 månaders garanti.

Garantivillkoren finns på webbsidan: <https://nenopl/gwarancja>

Detaljerad information, kontaktuppgifter och servicepunktens adress finns på:
<https://nenopl/kontakt>

*Specifikationer och uppsättningsens innehåll kan komma att ändras utan varsel.
Vi beklagar eventuella olägenheter.*



Den placerade symbolen för den överkorsade soptunnan indikerar att oanvända elektriska eller elektroniska apparater, dess tillbehör (såsom nätadapterar, kablar) eller komponenter (till exempel batterier, om de ingår) inte får kasseras med hushållsavfall. Lämplig åtgärd när det är nödvändigt att kassera enheter eller komponenter (t.ex. batterier) eller deras återvinning består i att ta enheten till en uppsamlingsplats där den kommer att accepteras gratis. Avfallshantering är föremål för omarbetning av WEEE-direktivet (2012/19/EU) och direktivet om batterier och ackumulatorer (2006/66/EG). Korrekt avfallshantering av enheten förhindrar miljöförstöring. Information om insamlingsplatser för enheter ges av berörda lokala myndigheter. Felaktigt avfallshantering är föremål för påföljder enligt gällande lag i ett visst område.

Tillverkare:

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b
31-752 Kraków
Polen

Tillverkat i Folkrepubliken Kina.



nenoplTM
www.nenopl
*inspired by Children,
designed by Parents*



nenō™

*inspired by Children,
designed by Parents*